


CHARMANT ClariShield

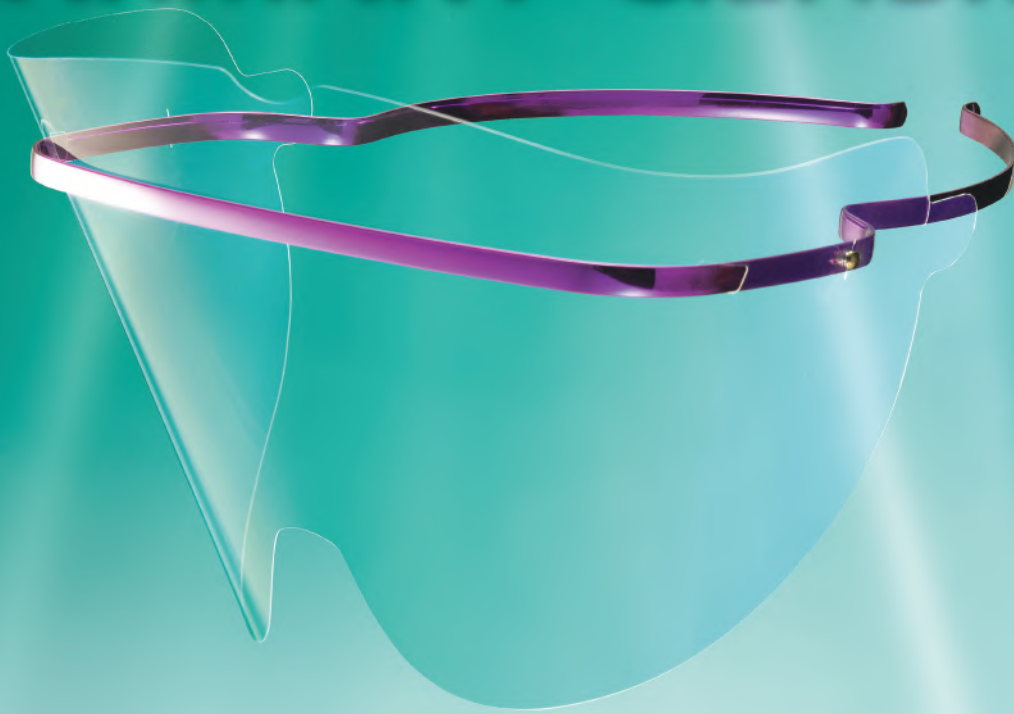

飛沫防護シールドに驚きの視界

A stealth splash shield

抜群の透明感&超低反射・防曇のシールド性能



High visibility, anti-reflective & anti-fogging.

超軽量&圧倒的な掛け心地のフレーム性能

Ergonomically designed for maximum fit & function.

- 男性用&女性用に
2サイズ×4カラー展開
Size & Color variation


M size : 100.0mm
S size : 90.0mm

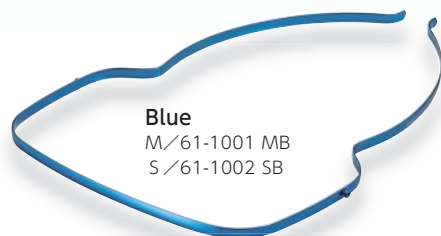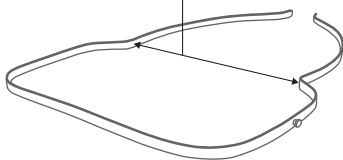


Blue
M/61-1001 MB
S/61-1002 SB



Silver
M/61-1001 MS
S/61-1002 SS

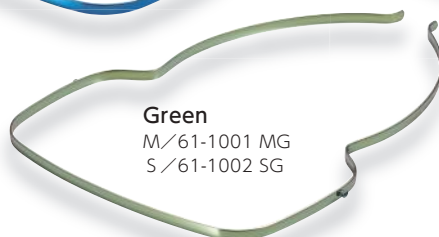

Green
M/61-1001 MG
S/61-1002 SG

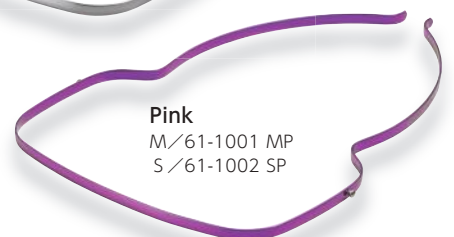


Pink
M/61-1001 MP
S/61-1002 SP

- メガネフレームとの併用も可能
Fits comfortably over eyeglasses



- 抜群の透明感に加え、
映りこみを極限までカット!
Highly transparent and reduces
reflection.

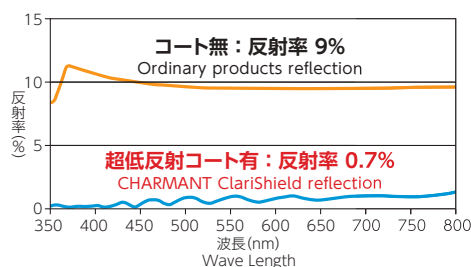


- コート無しの場合は照明の反射による映りこみが発生します
● Comparison of reflection



製品特長


クラリシールドはシャルマンの頭部データベースと掛け心地の研究からデザインされたフレームに、超高透過と超低反射性を備えたフィルムを組み合わせた、医療安全の向上に最適化された製品です。

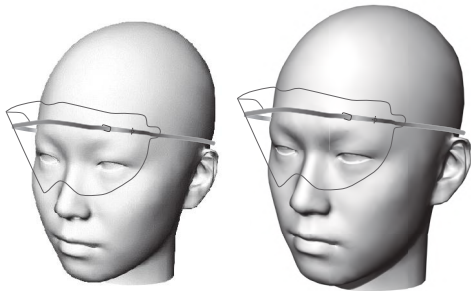

●顔型研究から算出された平均的日本人男性・日本人女性の3Dモデルを使って設計しています。



Product features

ClariShield combines Charmant's scientific study on head measurements to produce the secure and comfortable chassis coupled with a highly transparent and anti-reflective shield.

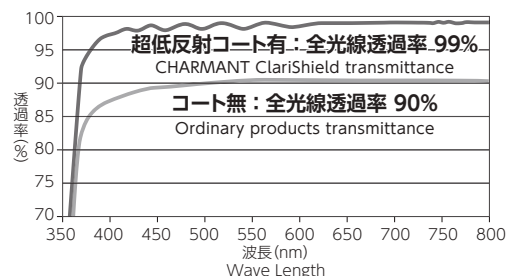



シールドの取り付け方

How to assemble your ClariShield

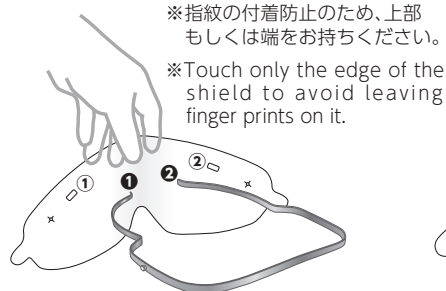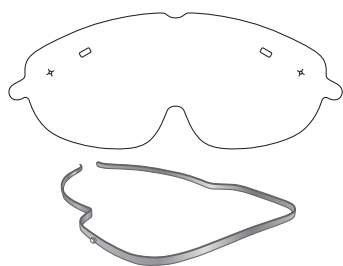

※指紋の付着防止のため、上部もしくは端をお持ちください。

※Touch only the edge of the shield to avoid leaving finger prints on it.

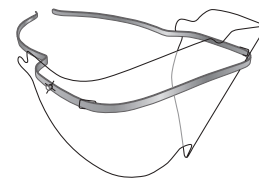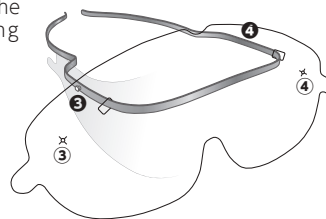

- (1) シールドをフレームに固定する場合はシールドの穴①にフレームの先端部①を、シールドの穴②にフレームの先端部②を通してください。
- (2) シールドをフレームに通した後にシールド穴③をフレーム③に、シールド穴④をフレーム④に入れ込んで固定します。
- (3) シールドがフレームにきちんと固定されているかを確認し、ご使用ください。

1. Insert the chassis tips ① and ② into the holes ① and ② on the shield.
2. Align holes ③ and ④ to pins ③ and ④. (Hook ③ and ④ to pins ③ and ④)
3. Before using, make sure the shield is securely fixed.

Item	SKU	Color	Material	Price (exc. tax)
M size	61-1001 MB	Blue	Titanium alloy	5,900円
	61-1001 MG	Green	Titanium alloy	5,900円
	61-1001 MP	Pink	Titanium alloy	5,900円
	61-1001 MS	Silver	Titanium alloy	5,900円

Item	SKU	Color	Material	Price (exc. tax)
S size	61-1002 SB	Blue	Titanium alloy	5,900円
	61-1002 SG	Green	Titanium alloy	5,900円
	61-1002 SP	Pink	Titanium alloy	5,900円
	61-1002 SS	Silver	Titanium alloy	5,900円

Item	SKU	Color	Material	Price (exc. tax)
Shield (x50pcs.)	61-1101	-	PET/Acrylic resin	10,000円
Rack	61-1201	-	Acrylic resin	5,000円

●オプション: 10本ラック
Option: 10 pcs. Rack



- フレームの仕様(日本製)
本 体:チタン合金
表面処理:陽極酸化
- シールドの仕様(日本製)
PET/アクリル樹脂
- 10本掛ラックの仕様(日本製)
アクリル樹脂

- Chassis (made in Japan)
Material: Titanium alloy
Surface Treatment: Anodization
- Shield (made in Japan)
Material: PET/Acrylic resin
- 10 pcs.Rack(made in Japan)
Material: Acrylic resin

“製品によって販売されていない地域があります。” “Not all products are available in all markets.”
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ※Designs and specification subject to change without notice

CHARMANT

●お問い合わせ先
株式会社 シヤルマン メディカル事業部 カスタマーサービス
〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1 www.charmant-medical.com
TEL.0120-180807 FAX.0120-030887 For English, medical@charmant.co.jp